

**F&P** Brevida™



## 鼻枕式面罩

**提高自信心的設計。  
專為舒適感而打造。**

提高患者的自信是 CPAP 治療成功的關鍵所在，  
而患者的自信來自於合適且舒適的面罩。

**新型**



# F&P Brevida™ 主要特色與優點

## 可調式頭套

可調節的頭套用於在睡覺時保持固定。

## AirPillow™ 密封圈

創新型 AirPillow™ 充氣之後可形成輕柔且有效的密封。



## VisiBlue™

面罩關鍵部件結合藍色醒目提示，有助於患者日常使用面罩。

## 可水洗擴散器

減少噪音和氣流的擴散器可進行水洗且十分耐用。



# 創新型 F&P Brevida™ AirPillow™ 密封圈

## 兩種密封圈尺寸

極小型小號和中等大號。

## 超薄型柔軟密封圈


密封區域由超薄 (0.25 mm) 的柔軟矽膠製成，提供輕柔的密封。

## 多功能枕式

多功能枕式的幾何構造適合多種鼻孔大小。

## 穩定側邊支撐

側邊支撐用於減少密封圈在睡覺期間鬆脫的可能性。

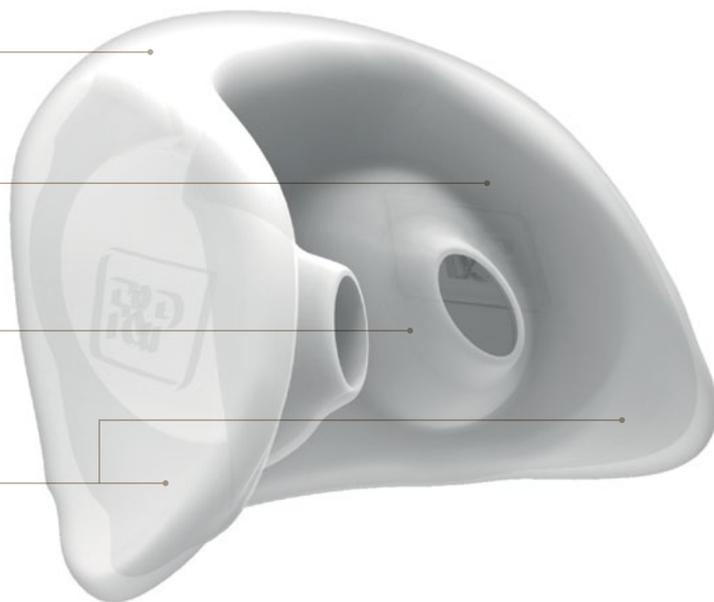


## 輕柔且柔軟的密封圈

AirPillow™ 密封圈充氣後形成輕柔的空氣「枕」，將鼻子內和附近的區域密封起來。


### F&P AirPillow™ 鼻枕式密封圈

密封鼻子內部和附近區域

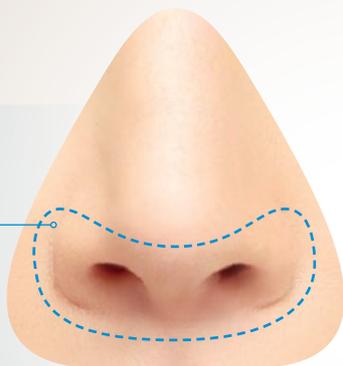

### 傳統鼻枕式密封圈

直接密封鼻孔

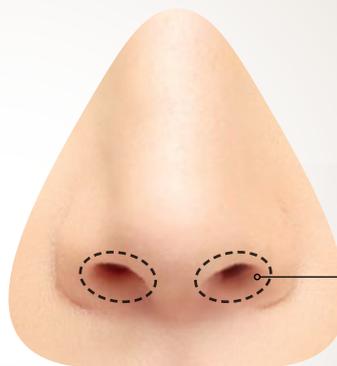

# 佩戴 F&P Brevida™



01

**步驟 1**  
將矽膠密封圈拿離您的鼻子，用手指小心張開矽膠密封圈柔軟的側邊支撐，然後引導兩個開口插入到您的鼻孔內。



02

**步驟 2**  
用一隻手將面罩框架放在適當的位置，另一隻手將頭套拉過頭部，按照上方的佩戴圖將固定帶置於耳朵上方。



03

**步驟 3**  
輕輕拉緊或放鬆頭套側面的頭套帶，直到取得舒適的貼合效果。

## 北美/亞洲太平洋地區產品訂貨代碼

面罩		400BRE114 Brevida 密封圈中等大號 (50 包)	
BREISA	Brevida 極小型小號 (1 個 XS-S 密封圈)	400BRE120	Brevida 頭套
BREIMA	Brevida 中等大號 (1 個 M-L 密封圈)	400BRE151	Brevida 頭套帶扣 (10 包)
BREISMA	Brevida XS-S 和 M-L (2 個密封圈)	400BRE161	Brevida 擴散器 (10 包)
備用零件		400BRE171	Brevida 彎頭
400BRE111	Brevida 密封圈極小型小號	400FPH241	F&P 旋轉接頭 2
400BRE112	Brevida 密封圈中等大號	400BRE131	Brevida 面罩 (無頭套) XS-S
400BRE113	Brevida 密封圈極小型小號 (50 包)	400BRE132	Brevida 面罩 (無頭套) M-L

## 歐洲/非洲/南美地區產品訂貨代碼

面罩		400BRE114 Brevida 密封圈中等大號 (50 包)	
BREISU	Brevida 極小型小號 (1 個 XS-S 密封圈)	400BRE120	Brevida 頭套
BREIMU	Brevida 中等大號 (1 個 M-L 密封圈)	400BRE151	Brevida 頭套帶扣 (10 包)
BREISMU	Brevida XS-S 和 M-L (2 個密封圈)	400BRE161	Brevida 擴散器 (10 包)
備用零件		400BRE171	Brevida 彎頭
400BRE111	Brevida 密封圈極小型小號	400FPH241	F&P 旋轉接頭 2
400BRE112	Brevida 密封圈中等大號		
400BRE113	Brevida 密封圈極小型小號 (50 包)		